


# Shandon PapSpin™

## PROTOCOLO PARA OBTENÇÃO DE AMOSTRAS DE ESPÉCIMES GINECOLÓGICOS

- 1 Coloque um rótulo no frasco de recolha PapSpin com a identificação correcta do paciente.
- 2 Retire a tampa do frasco do fluido de recolha PapSpin e deixe o frasco aberto numa mesa junto a si.
- 3 Insira o espéculo **sem recorrer ao uso de lubrificante**.
- 4 Entre em contacto com o colo do útero por meio da escova PAPETTE™ e insira as cerdas centrais no interior do canal cervical a uma profundidade suficiente para possibilitar que as cerdas mais curtas entrem em contacto com o exocolo. *(Consulte o diagrama).*

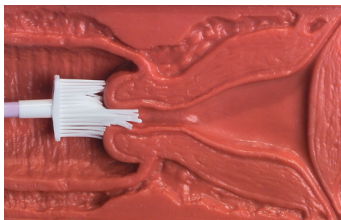

- 5 Exercendo uma pressão suave na direcção do colo do útero, rode a escova 5 vezes para a direita. Retire a escova PAPETTE™.



**NÃO POUSE A ESCOVA PAPETTE™.**

- 6 Utilizando um fórceps ou os dedos protegidos por uma luva retire a extremidade branca da escova PAPETTE™ da respectiva haste e insira-a no frasco com fluido de recolha PapSpin.



**NÃO ATRASE ESTE PASSO POR NENHUM MOTIVO.**

- 7 Volte a colocar a tampa no frasco e certifique-se que fica bem apertada. Agite o frasco e prepare-o para ser transportado.

### MANUSEAMENTO E ARMAZENAMENTO DO FLUÍDO DE RECOLHA PAPSPIN

**Manuseamento:** Mantenha os recipientes fechados sempre que não forem utilizados. Utilize luvas de protecção e óculos à prova de salpicos sempre que lidar com esta solução. Recomenda-se ainda a utilização de um avental impermeável como medida de protecção. Evite qualquer tipo de contacto com a pele e os olhos. No caso de ocorrer um derramamento não continue a usar a roupa contaminada.

**Armazenamento:** Armazene o produto num armário não inflamável. Mantenha o produto afastado do calor, faíscas e chamas.

**Thermo**  
ELECTRON CORPORATION

Anatomical Pathology  
Clinical Diagnostics  
171 Industry Drive  
Pittsburgh  
PA 15275, EUA

Tel: 1-800-547-7429  
+1 412 788 1133  
Fax: +1 412 788 1138  
[www.thermo.com/shandon](http://www.thermo.com/shandon)

**Para fazer novas encomendas de Shandon Papspin, encomende a peça com a referência A78710006 no seu revendedor local.**

Anatomical Pathology  
Clinical Diagnostics  
93-96 Chadwick Road  
Astmoor, Runcorn  
Cheshire, WA7 1PR, Reino Unido  
Tel: +44 (0) 1928 566611  
Fax: +44 (0) 1928 565845  
[www.thermo.com/shandon](http://www.thermo.com/shandon)